



ATTITUDE JUNIOR

ENTDECKE DEINE WELT

FÜR KLEINE ENTDECKER

ERKUNDE DEINE WELT,
ERLEBE ABENTEUER, GENIESSE DIE
FREIHEIT SELBSTSTÄNDIG ZU SEIN.

Mit Freunden unterwegs zum Spielplatz,
selbständig zur Schule fahren oder
Ausflüge mit der Familie machen.
Mit dem neuen ATTITUDE
Junior können Kinder und
Jugendliche ihrem Wunsch
nach Bewegung und
Freiheit gerecht werden.

// Sopur Attitude Junior
und Zippie Youngster 3



ATTITUDE
Junior

BIKEN IST IDEAL FÜR KINDER

- Es gehört zur natürlichen Entwicklung beim Heranwachsen
- Mehr Selbstbewusstsein durch Partizipation und Unabhängigkeit
- Fördert die Entwicklung von Koordination und Körperbewusstsein
- Stärkt das Herz-Kreislauf-System




AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS...

Einfach selbstständig. Mit dem einfachen Anklemm-Mechanismus wird das ATTITUDE in Sekundenschnelle an einen Rollstuhl an- und abgeklemmt. Ideal für Entdecker, die schnell die Welt erobern wollen.

Der Anklemm-Mechanismus ist unkompliziert, rastet einfach und sicher an der Vorderseite des Rollstuhls ein – ohne zusätzliche Teile oder unpraktische Kabel, die die Beinfreiheit einschränken.

Nach dem Abklemmen verbleiben nur zwei kleine Pins am Rollstuhl.

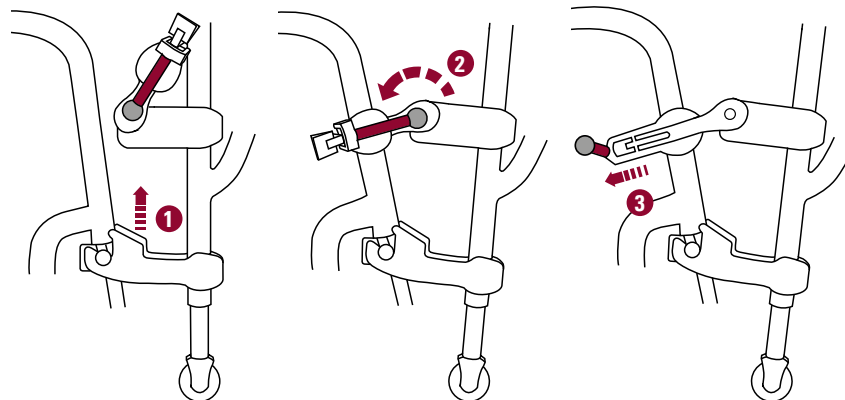

- 1 Die untere Halterung in die Pins einrasten lassen.**
- 2 Das Attitude am Handgriff etwas von sich wegdrücken und die oberen Klemmen nach unten schwenken.**
- 3 Die Verbindung arretieren indem man den Hebel zieht.**



→ Hier findest Du das Attitude Docking-Video!
Jetzt ansehen!

EIN TEAM, DAS ZUSAMMEN WÄCHST

Gemeinsam unterwegs – gemeinsam wachsen. Ein anklembares Handbike das mitwächst und sich den individuellen Bedürfnissen anpasst. Das ATTITUDE Junior ist das jüngste Mitglied unserer Handbike Familie und für Kinder ab einer Körpergröße von 120 cm geeignet. Sowohl Kurbelposition als auch Kurbellänge sind mit wenigen Handgriffen einstellbar - unerlässlich für ergonomisches Kurbeln und Freude am Handbiken.



EINFACH KINDGERECHT

Die horizontalen Griffe sorgen für eine ergonomische Handposition. Die 8-Gang-Nabenschaltung mit Drehgriffschalter und die integrierte Rücktrittbremse sind intuitiv zu bedienen und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit.



ATTITUDE Junior



// NABENSCHALTUNG

8 Gänge, intuitiv bedienbar mit einem Drehgriffschalter und integrierter Rücktrittbremse.



// HORIZONTALE GRIFFE

Die horizontale Position sorgt für eine optimale, ergonomische Handposition.



// LÄNGENEINSTELLBARE KURBEL

In zwei Positionen – auf unterschiedliche Armlängen anpassbar.



// PARKBREMSE

Eine einfach zu bedienende Parkbremse mit Einrastfunktion gehört bei allen Attitude-Modellen zur Standardausstattung.

TECHNISCHE DATEN

ATTITUDE JUNIOR // Anklembike für Kinder

Max. Benutzergewicht	100 kg
Rahmenbreite vorne (+ 20 mm verstellbar)	260 - 460 mm
Gewicht der Adapter am Rollstuhl	170 g
Gesamtgewicht des Anklemb-Handbikes	14,5 kg
Radgröße	16"
Schalthebel	Ganghebel
Gänge	Nabenschaltung mit 8 Gängen

Breite der V-Kurbel	220 mm
Länge der Kurbel	110 mm / 130 mm / 150 mm
Tiefenverstellung der Kurbelposition	100 mm
Winkelverstellung der Kurbelposition	28°
Bremse	Rücktrittbremse
Feststellbremse	ja (Felgenbremse)
Rahmenfarbe	31



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: international@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.eu



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung.

