


Permobil

F3 Corpus[®]

HMV-Nr. 18.99.06.1100 (mit Sitzlift)

HMV-Nr. 18.50.04.0178 (ohne Sitzlift)

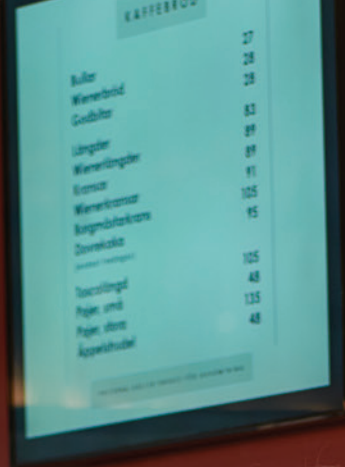

KAFFEEHAUS	
Boller	27
Wienerbröt	28
Gudibrot	33
Langst	89
Wienerstropfer	91
Brötchen	105
Wienerkränzen	95
Bergkäsekränzen	105
Dovelnäcke	48
Tagesbrot	
Papier und	135
Papier ohne	48
Kaffeehaus	48



permobil

Kompakt und stadttauglich

Die kompakte Größe und Wendigkeit des F3 Corpus ermöglicht es dem Benutzer, mühelos in engen Räumen zu manövrieren. Die *Smooth*-Federung sorgt jederzeit für eine komfortable Fahrt im städtischen Umfeld.

Corpus – folgt den Körperkonturen

Das ergonomische Design des Corpus-Sitzsystems folgt den Körperkonturen. Verbessertes Komfort sowie verbesserte Beckenpositionierung, seitliche Stabilität und Einsinkfähigkeit sind die Hauptmerkmale des neuen Corpus-Kissens.

Das Corpus-Kissen verfügt über einen weicheren Dual-Density-Schaumstoff an der Rückenlehne, eine neu gestaltete Beckenmulde und Stretch-Air™, einem atmungsaktiven, wasserabweisenden Kissenstoff, der bei 60 °C waschmaschinefest ist.

Active Reach

Für einen erweiterten Aktionsradius wird der Sitz um bis zu 30° nach vorne geneigt und die Sitzfläche angehoben. Dies erweitert die funktionelle Reichweite, um Transfers und Ihre täglichen Aktivitäten zu unterstützen.

Active Height

Erlaubt das Fahren mit bis zu 5 km/h bei vollständig ausgefahrenem Sitzlift und lässt sich nahtlos mit *Active Reach* kombinieren, um Ihnen den bestmöglichen Zugang zu Ihrer Umgebung zu ermöglichen.

Elektrisch verstellbare Rückenlehne

Sanfte und sichere elektrische Rückenlehnenverstellung mit nahtlos mitlaufendem Rücken (bei optionaler Wahl „RÜCKENLEHNE BIOMECHANISCH“), der zur Reduzierung der Scherkräfte für jeden Benutzer bis 150 kg sorgt.

Weiter Fahren

Die neue Permobil-Batterie und das Permobil VoltPro-Ladegerät arbeiten optimal zusammen, um Ihnen eine bis zu 25 % größere Reichweite, optimierte Ladezeiten und eine längere Batterielebensdauer zu bieten.

Sichereres Fahren im Dunkeln

LED-Leuchten sorgen vorne und hinten für mehr Helligkeit und bessere Sicht.



Active Reach neigt den Sitz um bis zu 30° nach vorne



Die elektrisch verstellbare Rückenlehne mit mitlaufendem Rücken (Option „RÜCKENLEHNE BIOMECHANISCH“) bewegt sich in die gewünschte Position

F3 Corpus® Spezifikationen

HMV-Nr. 18.99.06.1100 (mit Sitzlift),
HMV-Nr. 18.50.04.0178 (ohne Sitzlift)

Max. Geschwindigkeit	6 km/h (optional 10 km/h)
Reichweite (G34: 65 Ah / G24: 85 Ah-Batterien)	30 - 40 km*
Max. Benutzergewicht	150 kg
Hindernisbewältigung (mit Schwung)	60 mm (75 mm)
Min. Wenderadius	1.350 mm
Drehen im Flur	1.040 mm
Federung	unabhängig auf allen Rädern
Elektronik R-Net	120 A
Breite einschl. Sitz	610 - 790 mm
Höhe	970 - 1.170 mm
Min. Transportlänge ohne/mit Antikippstützen	790 / 890 mm
Min. Transporthöhe (gefaltete Rückenlehne)	825 mm
Gewicht inkl. Batterien (65 Ah / 85 Ah)	172 / 184 kg
Gewicht der Batterien 65 Ah / 85 Ah	2 x 17 kg / 2 x 23 kg
Sitzhöhe (mit elektrischer Sitzhöhenverstellung)	450 - 750 mm
Sitztiefe	370 - 570 mm (in 25-mm-Schritten)
Sitzbreite	420 - 570 mm (in 50-mm-Schritten)
Rückenlehnenbreite	360/410/460/510 mm
Rückenlehnenhöhe	470, 545 - 670 mm (in 25-mm-Schritten)
Abstand zwischen Armlehnen	380 - 480/480 - 580 mm
Crash-Test nach ISO 7176-19 – Dahl Dockingstation	Ja, max. 136 kg Benutzergewicht
Crash-Test nach ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja - max. 150 kg Benutzergewicht
Getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja

Ihre persönliche Note

SKY

VIOLETT

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATIN

FLAMINGO



Sitzhöhenverstellung
Active Height 0 - 300 mm



Sitzkantelung (nach vorne)
Active Reach 5 - 30°
(20°/30° VS-Beinstützen erforderlich)



Elektrisch und manuell verstellbare Beinstütze **90 - 180°**



Elektrisch verstellbare Rückenlehne **85 - 180°**
Manuell verstellbare Rückenlehne **120°**



Sitzkantelung **0 - 50°**




Armlehnenhöhe
185 - 320 mm

Sitzhöhe
(ohne Kissen)
ab Boden 450 mm

Basisbreite
610 mm

Länge mit/ohne
Antikippstützen
915 - 1.015 mm

*Die Reichweite kann je nach Gewicht des Benutzers, bei häufigem Gebrauch des Rollstuhls an Steigungen, unebenem Untergrund oder häufigem Überfahren von Bordsteinkanten variieren. Maße sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Die *Smooth*-Federung und Stabilität können den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, eine Stunde oder den ganzen Tag in einem Elektrorollstuhl zu verbringen.

Permobil

F3 Corpus[®]

HMV-Nr. 18.99.06.1100 (mit Sitzlift)

HMV-Nr. 18.50.04.0178 (ohne Sitzlift)

Was die Größe betrifft, ist der F3 Corpus der Kleine in unserer Familie von Elektrorollstühlen mit Vorderradantrieb. Aufgrund seiner Kompaktheit und Manövrierfähigkeit können Sie sich schnell in engen Räumen, wie belebten Straßen in der Stadt und überfüllten Einkaufszentren oder sogar kleinen Wohnungen bewegen.

Der F3 Corpus bietet eine außergewöhnlich komfortable Fahrt und reduziert Ihren Energiehaushalt dadurch, um mehr Kraft für den persönlichen Alltag zu haben.